

DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA







Países de lingua inglesa

*O sinal DEA usa a cor verde padrão RAL 6032







DESFIBRILACIÓN:

Único tratamiento para la Fibrilación Ventricular y taquicardia ventricular

300 JOULES DEFIB 20:29 01APR96 PADDLES X1.0 HR = ---







DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO (DESA)

- Analiza el ritmo cardiaco
- Identifica arritmias mortales
- Administra una descarga eléctrica





TIPOS DE DESFIBRILADORES

Manual.

Utilizado por personal sanitario.

Internos automáticos (DAI)

Parecidos a un marcapasos. Colocados por cardiólogos.

Externos Semiautomáticos o Automáticos





Desfibrilación por personal no médico

Recomendaciones Internacionales

- Deben ser desfibriladores externos <u>semiautomáticos</u> o automáticos.
- Se recomienda curso de formación.
- Su uso se realizará bajo supervisión y responsabilidad de un médico (061)





LEGISLACIÓN DESA

 Desde octubre de 2000 en Galicia existe una ley que regula la posibilidad de que <u>personal no médico</u> utilice un DESA.

 El que esta en vigor actualmente es el Decreto 38/2017 publicado en el DOG Núm. 70 del 10 abril de 2017.





OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- Comunicar al 061 la disponibilidad del DESA (registro de DESAS de uso público)
- Disponer de material mínimo (parches, cánulas, ambú..)
- Señalizar su existencia
- Formación y reciclaje del personal
- Revisión y mantenimiento según fabricante
- Seguir recomendaciones de uso





Técnica de desfibrilación con DEA

Después de comprobar que la persona esta en PCR

Encenderlo
Seguir INSTRUCCIONES VISUALES Y VERBALES!!!

MUY FÁCIL MANEJO!!!





Riesgos DESA

- Son seguros y efectivos
- Muy raramente provoca daños graves
 - Paciente: quemaduras.
 - Reanimador: descarga eléctrica.






Ante todo ... sea prudente

- Use el desfibrilador solamente si la víctima esta inconsciente y no respira normalmente (PCR)
- Asegúrese de que nadie está tocando a la víctima:
- La seguridad PROPIA.
- La seguridad de los TESTIGOS.





Colocación electrodos de desfibrilación

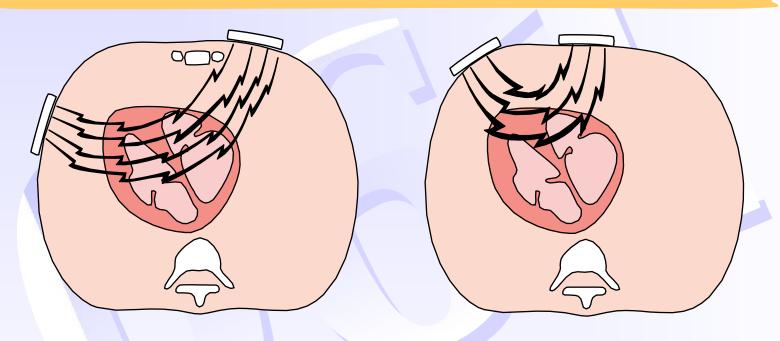

Posición correcta


Posición incorrecta

Una buena colocación de los electrodos optimiza la energía que pasa a través del corazón.






Colocación electrodos de desfibrilación

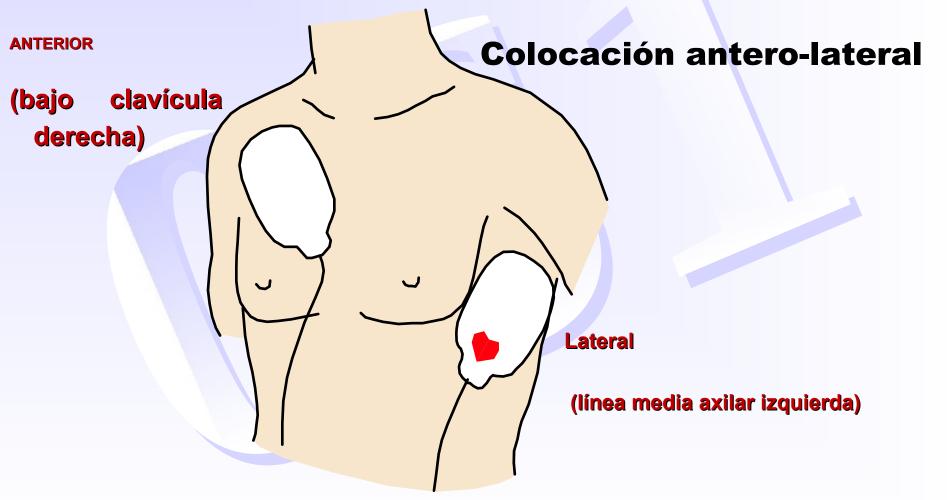






POSICION ANTERO-POSTERIOR

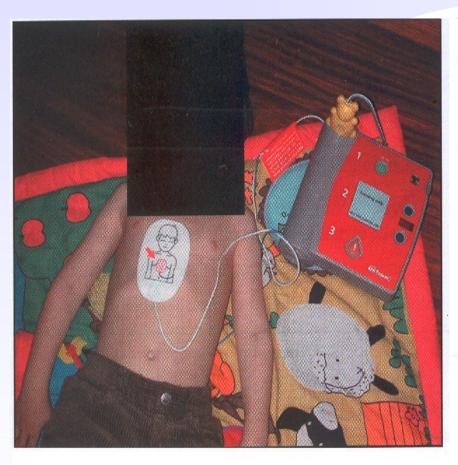

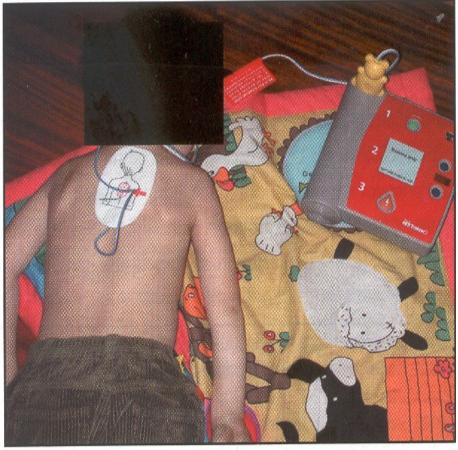





CÁNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL)



Tamaño

Distancia de comisura bucal a lóbulo de oreja.





RESUCITADOR MANUAL Y MASCARILLA FACIAL





Resucitador manual (Ambú)

- Mascarilla
- Permite sellado de boca y nariz
- Mejor transparentes



Circunstancias especiales

- Niños.
- Agua.
- Tórax con abundante vello.
- Obesos y mamas grandes.
- Delgadez extrema.
- Medicación transdérmica (parches).






NIÑOS

Mayores de 8 años: Los parches de adulto

Entre 1 y 8 años: recomiendan parches pediátricos con atenuadores de energía.

Menores de 1 año: No está recomendado su uso.

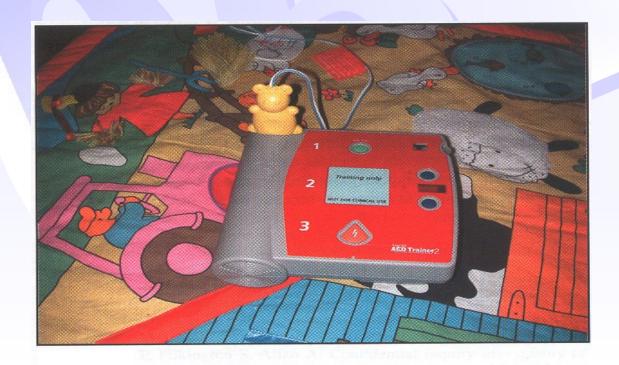





AGUA

El agua conduce bién la electricidad. Por <u>seguridad</u>:

Retirar al paciente de charcos. Resguardarse de la lluvia.

Por eficacia de la desfibrilación:

Secar el pecho del paciente de agua o sudor.





Tórax con abundante vello

Pegar los electrodos sobre el tórax aunque tenga mucho vello.

Si no detecta bien, presionar electrodos.

Si no es suficiente: retirar parches.


Rasurar la zona y pegar nuevos parches.





OBESOS

Se debe intentar estirar la piel en la zona de contacto con el parche para que no queden burbujas de aire que disminuyan la conducción de energía.

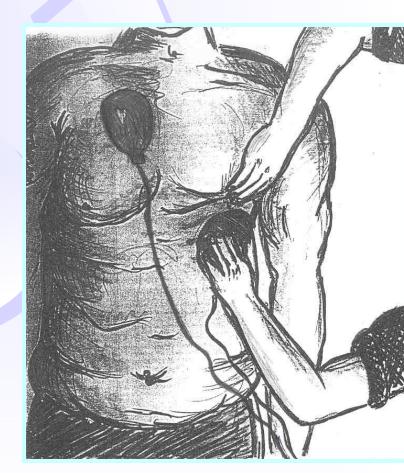






Delgadez extrema

Apretar cuidadosamente el parche contra la piel para un mejor contacto.

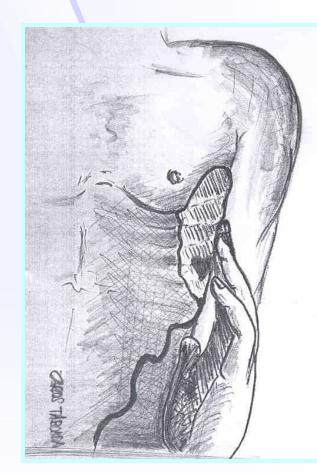





PARCHES DE MEDICACIÓN

Retirar y limpiar la zona.

Si se colocan sobre el parche de medicación hay riesgo de:

Quemaduras

Mala conducción de la electricidad al interior del tórax.





REGISTRO DE DATOS

Después del uso del DESA hay que cubrir la hoja de asistencia y remitirla al 061 dentro de las 72 horas siguientes, junto con la grabación del suceso.

Objetivos: incorporación a un registro de paradas, seguimiento del uso correcto, proponer acciones de mejora.







MANTENIMIENTO

iaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	107	100	100	1	1 1
dicador batería loxio de aréa)												-						-			-		23	24	25	20	27	28	29	30	31
loxio de aréa)		Ш	Ш	لبا		Ш	Ш	Ш																							
ministros auxiliares										-			-	-	-	-		-			-		-								
alla de man, uradora		Ш	Ш																												
serción correcta da																												+-			
		Ш	ш	Ш	ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш										
emanal																												-			
mprobar estado limpeza e danos																											-				
			Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш												
ntrol de estado de ches de repuesto																										-	- 20	-			=
		Ш	Ш		Ш	ш	Ш	H	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш														
ntrol de estado de setas de repuesto																-									-			-			-
cetas de repuesto	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		Ш																			
ería de repuesto m =																		-	-		-	-	-	-		-					
tro de caducidade		Ш	Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш																						
ensual														-							-	-	+	-							
de parches en Stock	_																											لـــا			
esponsable										-	-				or enclosery			of property and													
																					T										DETECTION OF THE PARTY.
500														1																	
oservacións								\perp					\perp			\perp															



APP URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA (mapa de desfibriladores)







LOCALIZACIÓN DESFIBRILADORES











